

Disponible en six tailles de lancettes et de profondeurs différentes pour vous permettre de choisir la lancette adéquate pour chaque test.

|                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>Unistik Touch</b><br>30 G 1,0 mm              | Mesure fréquente de la glycémie en pédiatrie et gériatrie (peaux très fines)                                                                                                                      | Boîte de 100 : 002292<br>Boîte de 200 : 002293 |
|  | <b>Unistik Touch</b><br>30 G 1,5 mm              | Mesure fréquente de la glycémie pour les peaux fines                                                                                                                                              | Boîte de 100 : 000361<br>Boîte de 200 : 000362 |
|  | <b>Unistik Touch</b><br>28 G 1,8 mm              | Mesure fréquente de la glycémie et autres tests (ex. cholestérol et hémoglobine)                                                                                                                  | Boîte de 100 : 000363<br>Boîte de 200 : 000364 |
|  | <b>Unistik Touch</b><br>23 G 2,0 mm              | Mesure de la glycémie et tests nécessitant des prélèvements plus importants, tels que l'INR (International Normalized Ratio), les tests de la fonction hépatique, le cholestérol et l'hémoglobine | Boîte de 100 : 000365<br>Boîte de 200 : 000366 |
|  | <b>Unistik Touch</b><br>21 G 2,0 mm              | Tests nécessitant des prélèvements plus importants (ex. marqueurs cardiaques, coagulation et gaz sanguins)                                                                                        | Boîte de 100 : 000367<br>Boîte de 200 : 000368 |
|  | <b>Unistik Touch</b><br>16 G (Ø1,5 mm)<br>2,0 mm | Tests nécessitant des volumes plus conséquents : bilan complet, gaz du sang, électrolytes, coagulation sanguine, bilirubine totale et marqueurs cardiaques                                        | Boîte de 100 : 002816<br>Boîte de 200 : 002817 |

Le dispositif approprié à utiliser dépend du volume sanguin nécessaire, ce qui va varier en fonction du type d'analyseur et de la marque.

Les dispositifs de la gamme Unistik® Touch sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Owen Mumford et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme SGS Belgium (1639). Ils sont destinés aux professionnels de santé dans le cadre des prélèvements sanguins capillaires. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de différents tests réalisés au sein des établissements de santé. Lire attentivement la notice d'utilisation. Pour le bon usage de ces produits, bien vérifiez que le capuchon n'a pas été précédemment enlevé. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Les produits Unistik Touch 30G 1,5mm, 28G et 23G sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie - code LPP : 6150226

## Unistik® Touch

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet : [owenmumford.com](http://owenmumford.com)


Nous disposons des accréditations suivantes :

- Certification ISO 13485
- Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
- CMDCAS 13485 (Canadian Health Authority)
- Systèmes de gestion environnementale ISO 14001



1. Dewland P and Edwards C. A single-blind, randomised, 3-way crossover study to compare the blood volume and pain perception of capillary blood sampling, 2007; UK. 2. Melzack R. and Wall P. The Challenge of Pain. England (1982): Penguin Books.

© Copyright Owen Mumford 2021  
UT-RANGE-FR-UT-MCO/0321/03

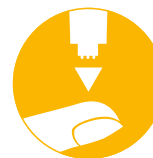

ACTIVATION  
PAR CONTACT

Un prélèvement  
adéquat en  
une fois



**Unistik® Touch**

## Conçu pour un prélèvement intuitif

Unistik® Touch est conçu pour rendre le prélèvement capillaire aussi simple et fluide que possible. Grâce à l'activation OneTouch, il vous suffit de presser le dispositif sur la zone de prélèvement, où il s'active automatiquement sous la pression. Une fois activée, la lancette se rétracte dans le corps du dispositif, ce qui minimise le risque de contamination croisée et de blessures.



### Lancette


(21G, 23G, 28G et 30G)

La lancette cachée se rétracte automatiquement après utilisation, minimisant le risque de contamination croisée et de blessures.



### Lame (16G)

La lame de ponction cachée a un diamètre de 1,5 mm et une profondeur de 2 mm assurant un volume sanguin plus important pour les tests.

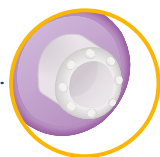

### Comfort Zone Technology®




### Activation par contact

Pour ceux qui préfèrent une activation tactile intuitive.



### Marquage du numéro de lot

Vous permet d'assurer la traçabilité et d'avoir l'esprit tranquille.

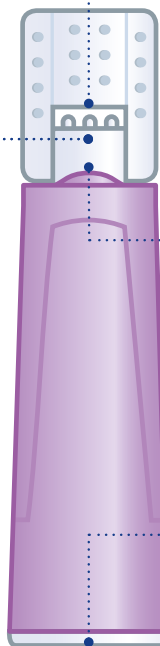


## La Comfort Zone Technology®, un confort prouvé pour les patients et les utilisateurs


La Comfort Zone Technology® réduit au maximum la douleur de prélèvement sur le doigt<sup>1,2</sup> et vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Lorsque l'autopiqueur est pressé sur la zone de prélèvement, une série de huit picots situés sur la plateforme stimule les terminaisons nerveuses. Cela envoie un puissant message de confort au cerveau, réduisant ainsi le stimulus de douleur causé par la lancette.




## Comment utiliser Unistik® Touch - rien de plus simple

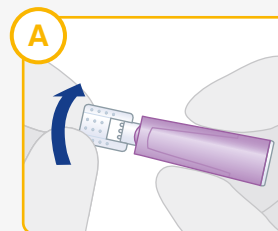

**DÉVISSEZ** et jetez le capuchon de la lancette. NE PAS TIRER.

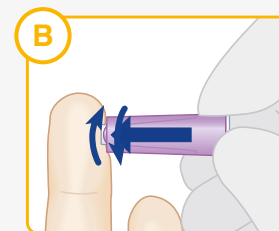

Pressez fermement la plateforme sur la zone de prélèvement en effectuant un mouvement rapide de va-et-vient et **DÉCLENCHEZ**.

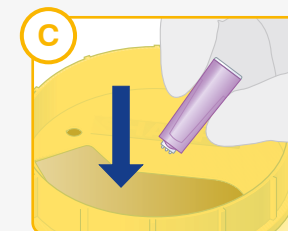

**ÉLIMINEZ** Unistik® Touch usagé dans un collecteur de déchets adapté.