

Une aiguille usagée peut provoquer une blessure, même si elle n'est exposée qu'un court instant avant d'être protégée. Cela peut susciter des inquiétudes chez les professionnels de santé et les patients.



Un prélèvement en toute sécurité

Grâce à son mécanisme de sécurité activé à une main après l'utilisation, **Unistik® VacuFlip** permet de minimiser le risque d'AES et offre un moyen sûr, rapide et facile d'effectuer des prélèvements de sang veineux.

Un prélèvement en **toute sécurité**

Variante	Taille	Longueur d'aiguille	Corps
Aiguille sécurisée	20G / 0,9 mm 21G / 0,8 mm 22G / 0,7 mm	25 mm / 1" 32 mm / 1 1/4" 38 mm / 1 1/2"	–
Aiguille sécurisée avec corps pré-monté	20G / 0,9 mm 21G / 0,8 mm 22G / 0,7 mm	25 mm / 1" 32 mm / 1 1/4" 38 mm / 1 1/2"	✓
Accessoire	Taille	Longueur d'aiguille	
Adaptateur Luer	21G / 0,8 mm	19 mm / 3/4"	



Prélèvement sanguin veineux sécurisé

Pour plus d'informations, visitez **owenmumford.com**

Unistik® VacuFlip est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Medline – CE n°DD 60149237 0001 et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TUV Rheinland (0197). Il est destiné aux professionnels de santé effectuant les prélèvements sanguins veineux dans les établissements de santé. Ce dispositif est une aiguille sécurisée pour le prélèvement veineux pour prévenir les accidents d'exposition au sang des soignants. Lire attentivement la notice d'utilisation.

© Copyright Owen Mumford 2022
VACUFLIP-GL-LT-FR/MCO/0522/01



Prélèvement sanguin veineux sécurisé

Un prélèvement en **toute sécurité**



ACTIVATION
DANS LA VEINE



GLISSEMENT DE
LA PROTECTION



BASCULE DE LA
PROTECTION



Owen Mumford, BP 3333, 5 rue de la Croix Blanche, 27950 Saint Marcel, France
T : +33 (0)2 32 51 88 70 E : contact@owenmumford.com owenmumford.com/fr






Manchon protecteur

- Le manchon protecteur est basculé sur l'aiguille une fois qu'elle est retirée du bras réduisant le risque de blessure
- La surface grainée améliore la préhension lors de l'activation manuelle
- Un clic audible signale l'activation du manchon protecteur et le verrouillage de l'aiguille



Porte-tube transparent

- Facilite la visualisation du remplissage des tubes de prélèvement

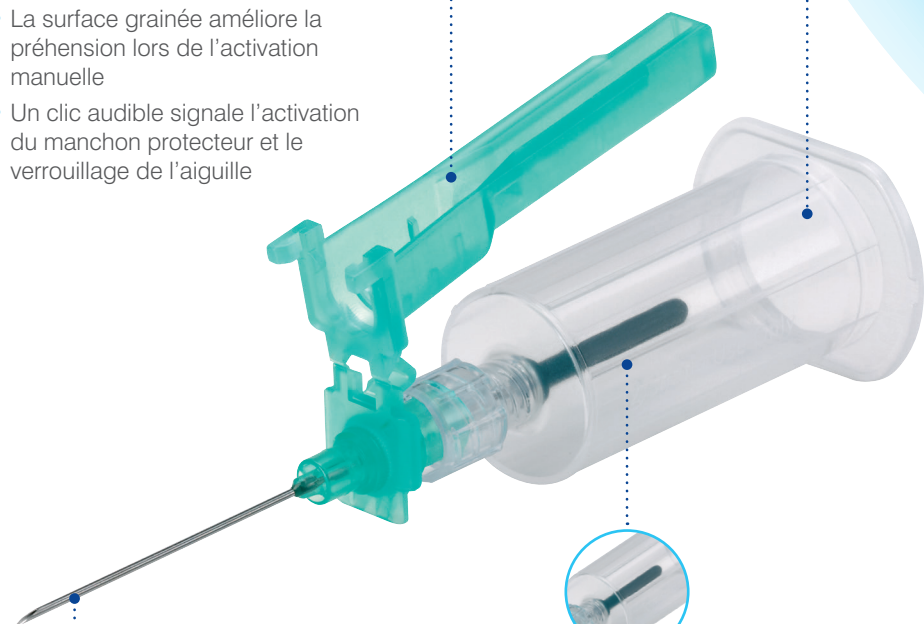

Luer multi-échantillons

- Permet de prélever plusieurs échantillons de sang sur un même patient




Aiguille

- Aiguille paroi fine pour un prélèvement sanguin plus rapide


Conçu pour des prélèvements sanguins simples, faciles et sécurisés.



Disponible en trois gauges et trois longueurs d'aiguille.

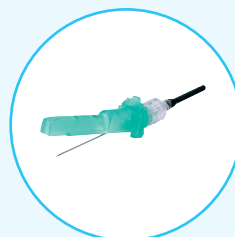


Aiguilles sécurisées pour prélèvement sanguin

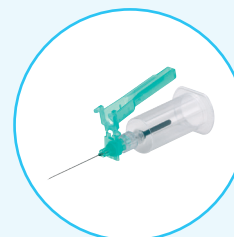


Aiguille sécurisée pour prélèvement sanguin avec corps pré-monté


Mode d'emploi

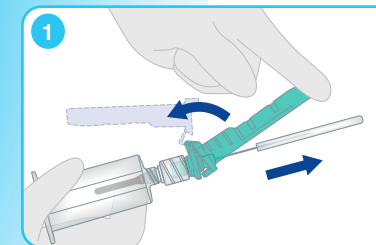


Basculez le manchon protecteur vers l'arrière exposant l'étui de l'aiguille. Retirez l'étui protecteur de l'aiguille.

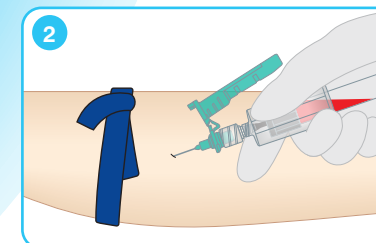


Réalisez la ponction veineuse. Prélevez un échantillon de sang conformément à la politique de votre établissement.

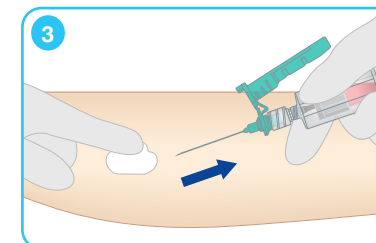

Une fois le prélèvement de sang terminé, retirez délicatement l'aiguille de la veine.

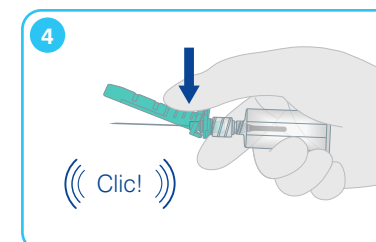

Basculez le manchon protecteur avec le pouce et verrouillez la canule de l'aiguille jusqu'à ce qu'un clic audible se fasse entendre indiquant que l'aiguille est verrouillée.

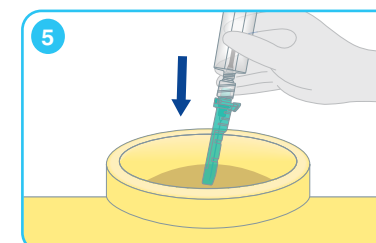

Éliminez tous les matériels usagés conformément à la politique de votre établissement.